



# DetectPro Wireless Alarm Monitor WC-MCC04

Operation Manual

Monitor alarmu je asistenčné zdravotnícke zariadenie na spustenie alarmu po prijatí výstražných signálov zo spárovaného zariadenia Warmcare. Zapne sa po pripojení k napájaniu alebo batériám bez vypínača. Pre správnu manipuláciu sa zariadenie musí spravovať podľa pokynov uvedených v tomto dokumente.

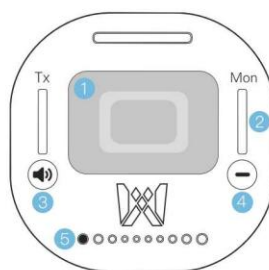


1. LED Alert Light
2. Indication Lights
3. Volume Setting
4. Pause/ Reset
5. External Reset Signal Receiver
6. Signal Transmission Port
7. Battery Compartment (Battery: AA 1.5V x 3)

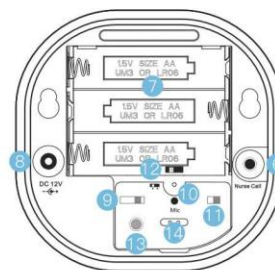

8. DC Input: 12V
9. Setting/ Ringtone/ Voice Alarm/ Mute
10. Microphone
11. Monitor Reset On/Off
12. Transmission On/Off
13. Pairing/ Recording
14. Programming Port

## Výmena batérie

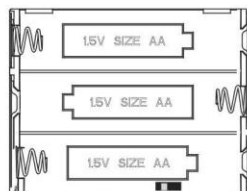

Odskrutkovaním otvorte puzdro na výmenu 3 kusov 1,5V batérií AA. Po správnej výmene batérií veko zaistite.

## Všeobecné použitie

### Bežný stav

- Spárované a pripojené k podložke so snímačom: Bliká žltá kontrolka vpravo (A);
- Senzorová podložka v prevádzke: Bliká žltá kontrolka na ľavej strane (B);

### Počas výstrahy

Blikajúce červené svetlá v strede, vľavo a vpravo so zvukovým signálom.

## Resetovanie výstrah

- Stlačte tlačidlo na monitore; alebo
- Nasmerujte externé resetovacie tlačidlo na prijímač externého resetovacieho signálu (A) a stlačte ho pre resetovanie; alebo
- Výstrahy sa vynulujú po opätovnom vyvinutí tlaku na podložku snímača.

*V prípade podlahovej rohože nedochádza k resetovaniu výstrah pri opätovnom použití tlaku na hornú časť.*

## Režim pauzy

- Vstup do režimu pozastavenia  
Stlač kým monitor nezačne vydávať "Zvuk "pipnutia" a žltá indikácia svetlá na ľavej a pravej strane.



- Ukončenie režimu pauzy

Stlač alebo automatické ukončenie po 10 s, ak monitor nedostane žiadny ďalší príkaz.


## Nastavenie hlasitosti



Stlač tlačidlo na výber medzi 4 úrovňami hlasitosti.

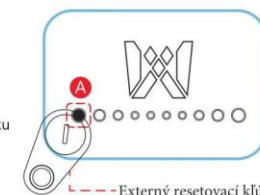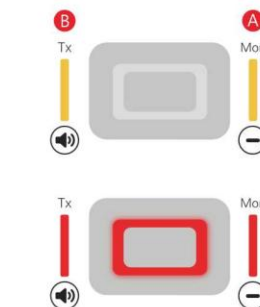

## Vypnutie alarmu

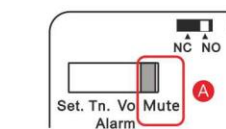

Otvorte puzdro na prepnutie do režimu "Mute" (A).




## ! Upozornenie:

- Nevykonávajte žiadnu údržbu. Za akékoľvek poškodenie alebo stratu spôsobenú nesprávnym používaním používateľmi alebo údržbou po záručnej dobe bude účtovaný poplatok za údržbu.
- V prípade potreby utrite neagresívnym dezinfekčným prostriedkom na čistenie. Monitor ani súvisiace zariadenia neponárajte do žiadnej tekutiny.
- Nevystavujte monitor a súvisiace zariadenia extrémne vysokým alebo nízkym teplotám, vysokej vlhkosti alebo priamemu slnečnému žiareniu.
- Zabráňte akémukoľvek nárazu do monitora (napr. pádu monitora na zem).
- V prípade akýchkoľvek zmien v návode na obsluhu sa nebude podávať žiadne ďalšie oznámenie.

## Nastavenie a hlasový záznam

Odskrutkovaním otvorte puzdro na nastavenie a nahrávanie hlasového budíka.

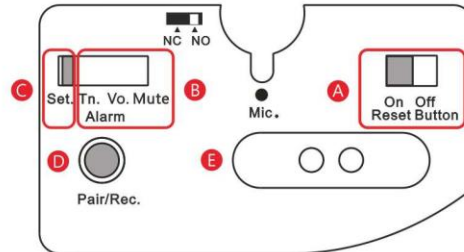

### (A) On/Off funkcie resetovania monitora

On: Zapnutá funkcia resetovania monitora;

Off: Funkcia resetovania monitora je vypnutá;

Na resetovanie alarmu sa používa externý resetovací kľúč.

### (B) Režim alarmu

Tn: Vyzváňací tón; Vo: Hlasový alarm;

Stlmiť: Upozornenie pomocou svetelnej signalizácie, stlmenie zvuku budíka.

### (C) Výber tónov zvonenia

Vyberte si spomedzi 5 vyzváňacích tónov.

1. Prepnutím na "Set." vstúpte do režimu nastavenia zvonenia. Monitor alarmu bude vydávať zvuk "Beep" (pípnutie) a uprostred budú svietiť blikajúce kontrolky až do ukončenia režimu nastavenia.
2. Stlač / (-) (Tlačidlo) na prednej strane monitora prehráva aktuálne zvonenie.
3. Stlač (-) (Tlačidlo) na výber ďalšieho zvonenia alebo (Tlačidlo) pre výber predchádzajúceho zvonenia.
4. Prepni na "Tn." pre používanie vybraného zvonenia a ukončenie režimu nastavenia.
5. Stlač (Tlačidlo) na prednej strane monitora prehráva vybrané zvonenie.

### (D) Nahrávanie hlasového alarmu

Prepnite na "Set." (C) pre vstup do režimu hlasového záznamu. Stlačte a podržte Pair/Rec. pre nahrávanie. Monitor vydá zvuk "pípnutia", ktorý signalizuje začiatok nahrávania, uvoľnením tlačidla nahrávanie zastavíte.

Úspešné nahrávanie nového hlasového alarmu nahradí pôvodný záznam.

Prehrávanie hlasového alarmu: Pair/Rec. stlačte tlačidlo


\* Postavte sa tvárou k mikrofónu, ktorý prijíma a Mic počas nahrávania pre čistejší zvuk nahráva, a hovorte priamo naň.

### (E) Nastavenie programovania

Pri používaní so zariadením CMU Touch sa vyžaduje programovanie. Pripojte monitor a programátor káblom k portu na programovanie pre nastavenie ID zariadenia.

\* Podrobnosti nájdete v návode na obsluhu programátora.

## Párovanie zariadení

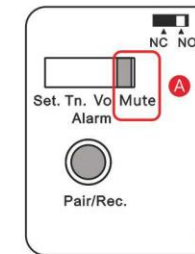

### Párovanie zariadenia

1. Vstup do režimu párovania:
  - a. Prepni na "Mute" (A);
  - b. Stlač Pair/Rec. tlačidlo, kým monitor nevydá oznamovací zvuk a nerozsvieti sa červená kontrolka na pravej strane monitora;
2. Spustíte zariadenia Warmcare na spárovanie s monitorom;
3. Monitor vydá "pípnutie", ktoré signalizuje úspešné spárovanie.

\* Ak chcete odstrániť pôvodné párovanie, stlačte Pair/Rec. po opätovnom stlačení tlačidla pri vstupe do režimu párovania monitor vydá zvuk "Pípnutie", ktorý signalizuje zrušenie pôvodného párovania.

\* Predchádzajúce párovanie by sa nahradilo novým párovaním, ak je opakované spárovanie.

### Ukončenie režimu párovania

Stlač (-) alebo Pair/Rec. alebo automatické ukončenie po 10 sekundách, ak nie je k dispozícii žiadna ďalšia príkaz prijatý monitorom

## Slabá batéria



### (a) Slabá batéria pre monitor:

Nepretržité svietenie červenej kontrolky vpravo a upozornenie "Pípnutie" signalizujú slabú batériu monitora. Vymeňte včas batérie alebo zabezpečte stabilné pripojenie k jednosmernému napájaniu.

### (b) Vybitá batéria pre vysielateľ:

Nepretržité svietenie červenej kontrolky na ľavej strane a upozornenie "Pípnutie" signalizujú slabú batériu vysielateľa. Batérie vysielateľa včas vymeňte.

## Indikácia straty signálu

Monitor vydá varovanie "Pípnutie" a rozsvieti červené svetlá v strede, vľavo a vpravo, keď sa zistia nižšie uvedené podmienky:

- (a) Odpojený s vysielateľom
- (b) Odpojenie s volaním sestry
- (c) Odpojené od zdroja napájania

